


TIPLESS NITINOL STEINFANGKÖRBCHEN

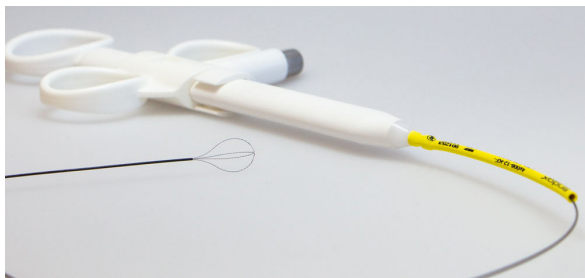

Konstruktion

Die Tipless Steinfänger bestehen aus 4 Nitinoldrähten. Der Nitinol-Zugdraht ist in einem Polyimide-Schlauch geführt und kann mit einem Drei-Finger-Handgriff geöffnet und geschlossen, wie auch radial und axial manipuliert werden. Die Steinfänger sind in den Größen 1.9 – 3.0 French erhältlich.

- keine zusätzlichen Komponenten am Körbchen
- hohe Zugfestigkeit
- hohe Expansionskraft
- gute Torque-Eigenschaften
- proportionale Öffnung

Erläuterungen

Länge	90 / 120 cm
KörbchenØ	6 / 10 / 12 / 14 mm
Material	Nitinol
Konstruktion	4 Drähte
SchaftØ	1.9 / 2.6 / 3.0 Fr
Material	Polyimide / PEEK
Handgriff	3-Finger

Kundenwünsche

Neben unseren Standards fertigen wir auch Tipless Steinfangkörbchen aus Nitinol nach Ihren Vorgaben und Wünschen.

